



REC'D 24 JAN 2005	
WIPO	PCT

BREVET D'INVENTION

CERTIFICAT D'UTILITÉ - CERTIFICAT D'ADDITION

COPIE OFFICIELLE

Le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle certifie que le document ci-annexé est la copie certifiée conforme d'une demande de titre de propriété industrielle déposée à l'Institut.

Fait à Paris, le 23 SEP. 2004

Pour le Directeur général de l'Institut
national de la propriété industrielle
Le Chef du Département des brevets

BEST AVAILABLE COPY

DOCUMENT DE
PRIORITÉ

PRÉSENTÉ OU TRANSMIS
CONFORMÉMENT À LA RÈGLE
17.1. a) OU b)

e PLANCHE

INSTITUT
NATIONAL DE
LA PROPRIÉTÉ
INDUSTRIELLE

26 bis, rue de Saint-Petersbourg
75800 PARIS cedex 08
Téléphone : 33 (0)1 53 04 53 04
Télécopie : 33 (0)1 53 04 45 23
www.inpi.fr



26 bis, rue de Saint Pétersbourg - 75800 Paris Cedex 08

Pour vous informer : INPI DIRECT

INPI 0 825 83 85 87

0,15 € TTC/mn

Télécopie : 33 (0)1 53 04 52 65

19 DEC 2003

REMISE DES PIÈCES

DATE 75 INPI PARIS 34 SP

LIEU

0314464

N° D'ENREGISTREMENT

NATIONAL ATTRIBUÉ PAR L'INPI

DATE DE DÉPÔT ATTRIBUÉE

PAR L'INPI

10 DEC. 2003

Vos références pour ce dossier 3A-0008
(facultatif)

BREVET D'INVENTION CERTIFICAT D'UTILITÉ

Code de la propriété intellectuelle - Livre VI



N° 11354*03

REQUÊTE EN DÉLIVRANCE page 1/2



Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire

DS 540 @ W / 030103

☒ NOM ET ADRESSE DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE
À QUI LA CORRESPONDANCE DOIT ÊTRE ADRESSÉE

CORALIS
22 rue du général Foy
75008 Paris

Confirmation d'un dépôt par télécopie

☐ N° attribué par l'INPI à la télécopie

☒ NATURE DE LA DEMANDE

Cochez l'une des 4 cases suivantes

Demande de brevet

☒

Demande de certificat d'utilité

☐

Demande divisionnaire

☐

Demande de brevet initiale

N°

Date

ou demande de certificat d'utilité initiale

N°

Date

Transformation d'une demande de
brevet européen *Demande de brevet initiale*

☐

N°

Date

☒ TITRE DE L'INVENTION (200 caractères ou espaces maximum)

Procédé automatique de vérification d'au moins une caractéristique de centrage d'une lentille ophtalmique
pouvant de repères

☒ DÉCLARATION DE PRIORITÉ
OU REQUÊTE DU BÉNÉFICE DE
LA DATE DE DÉPÔT D'UNE
DEMANDE ANTÉRIEURE FRANÇAISE

Pays ou organisation

Date

N°

Pays ou organisation

Date

N°

Pays ou organisation

Date

N°

☐ S'il y a d'autres priorités, cochez la case et utilisez l'imprimé «Suite»

☒ DEMANDEUR (Cochez l'une des 2 cases)

☒ Personne morale

☐ Personne physique

Nom
ou dénomination sociale

Essilor International (Compagnie Générale d'Optique)

Prénoms

Forme juridique

N° SIREN

Code APE-NAF

Société Anonyme

7 1 2 0 4 9 6 1 8

Domicile

ou

siège

Rue

Code postal et ville

Pays

147 rue de Paris

94227 Charenton

Nationalité

N° de téléphone (facultatif)

Adresse électronique (facultatif)

Française

N° de télécopie (facultatif)

☐ S'il y a plus d'un demandeur, cochez la case et utilisez l'imprimé «Suite»

Remplir impérativement la 2^{ème} page



BREVET D'INVENTION CERTIFICAT D'UTILITÉ

REQUÊTE EN DÉLIVRANCE
page 2/2

BR2

10 DEC 2003
REMISE DES PIÈCES
DATE 75 INPI PARIS 34 SP
LIEU 0314464
N° D'ENREGISTREMENT
NATIONAL ATTRIBUÉ PAR L'INPI

DB 540 W / 210502

6 MANDATAIRE (s'il y a lieu)	
Nom	CHAUVIN
Prénom	Vincent
Cabinet ou Société	Coralis
N° de pouvoir permanent et/ou de lien contractuel	
Rue	22 rue du général Foy
Adresse	Code postal et ville 75008 Paris
Pays	
N° de téléphone (facultatif)	01 44 70 60 00
N° de télécopie (facultatif)	01 44 70 60 02
Adresse électronique (facultatif)	cabinet@coralis.info
7 INVENTEUR (S)	
Les demandeurs et les inventeurs sont les mêmes personnes	<input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non : Dans ce cas remplir le formulaire de Désignation d'inventeur(s)
8 RAPPORT DE RECHERCHE	
Établissement immédiat ou établissement différé	<input checked="" type="checkbox"/> Uniquement pour une demande de brevet (y compris division et transformation) <input type="checkbox"/>
Paiement échelonné de la redevance (en deux versements)	Uniquement pour les personnes physiques effectuant elles-mêmes leur propre dépôt <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
9 RÉDUCTION DU TAUX DES REDEVANCES	
	Uniquement pour les personnes physiques <input type="checkbox"/> Requête pour la première fois pour cette invention (joindre un avis de non-imposition) <input type="checkbox"/> Obtenue antérieurement à ce dépôt pour cette invention (joindre une copie de la décision d'admission à l'assistance gratuite ou indiquer sa référence): AG
10 SÉQUENCES DE NUCLEOTIDES ET/OU D'ACIDES AMINÉS	
Le support électronique de données est joint	<input type="checkbox"/> Cochez la case si la description contient une liste de séquences
La déclaration de conformité de la liste de séquences sur support papier avec le support électronique de données est jointe	<input type="checkbox"/>
Si vous avez utilisé l'imprimé «Suite», indiquez le nombre de pages jointes	
11 SIGNATURE DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE (Nom et qualité du signataire) Vincent CHAUVIN CPI n° 00 0401	
VISA DE LA PRÉFECTURE OU DE L'INPI M. ROCHET	

La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux réponses faites à ce formulaire.
Elle garantit un droit d'accès et de rectification pour les données vous concernant auprès de l'INPI.

La présente invention concerne de manière générale la détection de repères sur une lentille ophtalmique.

Elle concerne plus particulièrement un procédé automatique de vérification d'au moins une caractéristique de centrage d'une lentille ophtalmique à addition progressive de puissance, qui fait intervenir la localisation des repères de ladite
5 lentille.

Lors du montage d'une lentille progressive sur une monture, il est important pour le confort visuel du porteur de s'assurer du positionnement convenable de la lentille par rapport à l'œil dont elle corrige un défaut de réfraction ou
10 d'accommodation.

La lentille ophtalmique est centrée lorsque le centre de référence de la lentille prévu lors de la conception et le centre pupillaire de l'œil sont alignés ou, autrement formulé, lorsque la ligne de regard passe par le centre de référence de la lentille. Le centrage résulte donc du rapprochement de deux données
15 géométrico-optiques : la morphologie pupillaire du porteur et la position sur la lentille du centre de référence.

Lors de sa fabrication, toute lentille progressive est munie de repères provisoires sous la forme d'un marquage à la peinture et de repères permanents sous la forme de gravures. Les repères provisoires permettent un centrage
20 commode de la lentille préalablement à son montage. Les repères permanents permettent d'identifier, sur la monture du patient, la nature de la lentille ophtalmique progressive, la valeur de l'addition ainsi que de vérifier ou rétablir, après effacement des repères provisoires, le repérage exact de ladite lentille. On comprend en effet que les repères provisoires seront effacés par l'opticien avant la
25 remise des lunettes à son client et ils pourront, au besoin, être rétablis à partir des repères permanents gravés qui restent sur la lentille.

Plus précisément, comme le montre la figure 10, les repères provisoires comprennent habituellement :

- une croix 11 dite de montage ou centrage, matérialisant le centre de la zone de vision de loin destinée à être positionnée au centre de la pupille du porteur quand
30 celui-ci regarde à l'infini droit devant lui ; elle permet de positionner en hauteur la progression de puissance de la lentille 10 par rapport à l'œil, de telle sorte que le porteur trouve facilement, comme prévu par le concepteur de la lentille, la

- puissance correctrice dont il a besoin en vision de loin, en vision intermédiaire et en vision de près ;
- un point central 12 situé, selon les types de lentilles, de 2 à 6 mm au-dessous de la croix de montage 11 et qui localise le "centre optique" de la lentille 10 ; ce
 - 5 "centre optique" est conventionnellement, pour une lentille progressive, le point de « référence prisme » où est mesurée la puissance prismatique nominale de la lentille 10 correspondant à la prescription du porteur ;
 - un cercle 13 de mesure de la puissance de vision de loin de la lentille, situé dans la partie supérieure de la lentille 10, juste au-dessus de la croix de montage 11, et
 - 10 qui localise le point de référence pour la vision de loin ; il s'agit donc du lieu où un frontofocomètre devra être placé pour mesurer la puissance de vision de loin de la lentille 10;
 - un cercle 14 de mesure de la puissance de vision de près de la lentille, situé dans la partie inférieure de la lentille 10 et qui entoure le centre ou point de
 - 15 référence de la zone de vision de près ; ce centre est décentré du côté nasal de 2 à 3 mm et la distance qui le sépare de la croix de montage 11 constitue la longueur nominale de la progression de la lentille 10 ;
 - un ou plusieurs traits 15 repérant l'horizontale de la lentille 10 et qui seront utilisés pour le centrage.
- 20 Comme le montre également la figure 10, les repères permanents comprennent en général :
- deux petits cercles ou signes 16 localisés sur l'horizontale de la lentille 10 passant par le centre optique et situés systématiquement à 17 mm de part et d'autre du centre optique 12; ces gravures permettent de retrouver le centrage
 - 25 horizontal et vertical de la lentille ;
 - un signe 17 permettant d'identifier la marque et la nature exacte de la lentille progressive (par exemple ~~V~~ pour Varilux®) qui est gravé sous le petit rond ou signe nasal ;
 - un nombre à 2 ou 3 chiffres représentant la valeur de l'addition (par exemple 30
 - 30 ou 300 pour une addition de 3,00 D) qui est gravé sous le petit rond ou signe temporal.

Pour mémoire, on se souviendra que, pour les lentilles à foyers multiples présentant une ou plusieurs lignes de discontinuité de puissance, ces lignes tiennent lieu de repères permanents.

Le centrage d'une lentille progressive comporte deux composantes : l'une verticale, l'autre horizontale.

Le centrage vertical permet de positionner en hauteur la progression de puissance de la lentille devant l'œil, de telle manière que ce dernier puisse trouver facilement, comme prévu par le concepteur de la lentille, la puissance correctrice dont il a besoin. La puissance de la correction de vision de loin doit être atteinte sur l'axe de la position primaire du regard et la puissance de vision de près sur l'axe du regard lors de l'abaissement de celui-ci pour la vision de près.

Ce centrage vertical s'effectue classiquement au moyen de la croix de centrage de vision de loin peinte à cet effet sur la lentille par le fabricant : il consiste à positionner la croix de centrage de la lentille devant le centre de la pupille de l'œil du patient regardant à l'infini. Dans la pratique, l'opticien mesure la hauteur entre le bas de la monture et le centre de la pupille du porteur regardant à l'horizontale et positionne la croix de centrage de la lentille à la hauteur mesurée.

Le centrage horizontal consiste à positionner latéralement la lentille progressive par rapport à l'œil de manière à ce que le porteur puisse en utiliser de manière optimale les zones de vision de loin, de vision intermédiaire et de vision de près.

Les études physiologiques ont fait ressortir que les centres pupillaires présentent, dans 25% des cas, une dissymétrie horizontale de plus de 1 mm par rapport au nez et, dans 60% des cas, un écart vertical de plus de 1 mm. Il est donc avantageux de pouvoir vérifier le centrage de chacune des deux lentilles indépendamment de l'autre et c'est pourquoi il est préférable de pouvoir mesurer les demi-écarts interpupillaires droit et gauche plutôt que seulement l'écart interpupillaire global.

Toutes les lentilles progressives possèdent, de construction, un positionnement relatif des zones de vision de loin et de vision de près, avec un décentrement nasal de la zone de vision de près par rapport à la zone de vision de loin.

Le centrage horizontal de la lentille peut donc s'effectuer, soit par rapport à la vision de près, soit par rapport à la vision de loin (cas le plus usuel).

Le centrage par rapport à la vision de loin consiste à mesurer les demi-écarts interpupillaires droit et gauche du patient regardant en vision de loin, c'est-à-dire les distances qui séparent la racine du nez du centre des pupilles (ou plus

précisément des reflets cornéens) de l'œil droit et de l'œil gauche. Les croix de montage de vision de loin de la lentille de droite et de la lentille de gauche sont alors positionnées à ces distances du plan médian ou nasal de la monture.

5 La lentille étant convenablement orientée autour de son axe optique ou central, avec les traits horizontaux (ou les cercles gravés) alignés suivant l'horizontale de la monture, la zone de vision de près se trouve, par la construction de la lentille, convenablement décentrée du côté nasal de 2 à 3 mm par rapport à la vision de loin.

10 Le centrage par rapport à la vision de près, plus rarement réalisé, s'effectue de la manière analogue par la mesure des demi-écarts interpupillaires du patient regardant en vision de près et par le positionnement du centre de la zone de vision de près des lentilles de gauche et de droite à ces distances.

Cette seconde méthode présente un intérêt particulier en cas de convergences dissymétriques entre l'œil droit et l'œil gauche.

15 Par rapport à ce qui vient d'être exposé, l'invention propose un procédé de vérification d'au moins une caractéristique de centrage d'une lentille ophtalmique pourvue de repères et montée sur une monture, comprenant les étapes suivantes :

- 20 a) on positionne la lentille ophtalmique sur un support placé en regard d'un filtre à motifs,
- b) on éclaire au travers dudit filtre à motifs la lentille ophtalmique à l'aide d'une source de lumière diffuse,
- c) on recueille par une caméra numérique la lumière transmise par la lentille ophtalmique,
- 25 d) on traite le signal sortant de la caméra numérique pour déterminer la position des repères permanents de la lentille ophtalmique dans un référentiel fixe,
- e) on détermine la position du support dans le référentiel fixe, et
- f) on déduit de la position connue du support et de la position des repères permanents de la lentille ophtalmique, la valeur de ladite caractéristique de centrage.
- 30

D'autres caractéristiques non limitatives et avantageuses du procédé conforme à l'invention sont les suivantes :

- lors de l'étape d) on réalise simultanément l'étape e),

- à l'étape e) on recueille par la caméra au moins une image de repérage formée, en ombre, par un pointeur passif prévu sur le support,

- à l'étape b) on éclaire ledit support à l'aide de ladite source de lumière diffuse, à l'étape c) on recueille par ladite caméra numérique la lumière transmise
5 au travers dudit support et à l'étape e) on traite le signal sortant de la caméra numérique pour déterminer la position du pointeur passif dans le référentiel fixe,

- à l'étape e) on recueille un signal émis directement par le support au niveau dudit pointeur passif,

- à l'étape f) on détermine le demi-écart interpupillaire en calculant la
10 distance existant entre la position du milieu du nez de ladite monture donnée par un des pointeurs passifs dudit support et la position du point central de ladite lentille ophtalmique situé au milieu du segment de droite reliant les deux repères permanents correspondants de ladite lentille ophtalmique,

- à l'étape f) on détermine la hauteur en calculant la distance existant entre la
15 position du bord supérieur ou inférieur de ladite monture et la position du point central de ladite lentille ophtalmique situé au milieu du segment de droite reliant les deux repères permanents correspondants de ladite lentille ophtalmique, et

- à l'étape e) la position du support est déduite d'une position initiale déterminée lors d'une étape préliminaire d'initialisation et d'un déplacement
20 mesuré du support pour placer la lentille ophtalmique en regard des moyens d'éclairement.

La description qui va suivre en regard des dessins annexés, donnés à titre d'exemples non limitatifs, fera bien comprendre en quoi consiste l'invention et comment elle peut être réalisée.

25 Sur les dessins annexés :

- la figure 1 est vue schématique en perspective du dispositif selon l'invention avec son support de lentille dans une première position ;
- la figure 2 est vue schématique en perspective du dispositif selon l'invention avec son support de lentille dans une deuxième position ;
- 30 - la figure 3 est une vue schématique de côté montrant les principaux composants internes du dispositif de la figure 1 fonctionnant en mode tensiscope ;
- les figures 4A et 4B sont des vues schématiques de dessus de deux filtres à motifs différents pour le dispositif selon l'invention ;

- la figure 5 est une vue schématique de côté montrant les principaux composants internes du dispositif de la figure 1 fonctionnant en mode Pal Id pour les lentilles ophtalmiques en matière synthétique;
- la figure 6 est une vue schématique de côté montrant les principaux composants internes du dispositif de la figure 1 fonctionnant en mode Pal Id pour les lentilles ophtalmiques en matière minérale ;
- la figure 7 est une vue schématique de dessus d'un mode de réalisation du support du dispositif de la figure 1 positionné dans la deuxième position ;
- la figure 8 est une vue schématique de dessus d'un mode de réalisation du support du dispositif de la figure 1 positionné dans la première position ;
- la figure 9 est une vue schématique en perspective du support du dispositif de la figure 1 ; et
- la figure 10 est une vue schématique de dessus d'une lentille ophtalmique à addition progressive de puissance pourvue de ses repères provisoires et permanents.

Sur les figures 1 et 2 on a représenté un dispositif 100 permettant de détecter automatiquement diverses caractéristiques d'une lentille ophtalmique 10 pourvue de repères.

Avantageusement, ce dispositif 100 intègre au moins trois fonctions différentes à savoir la fonction « Pal Id », la fonction tensiscope et la fonction frontofocomètre.

Ainsi, en mode « Pal Id », il permet de vérifier automatiquement au moins une caractéristique de centrage d'une lentille ophtalmique à addition progressive de puissance (en matière synthétique ou minérale) montée sur la monture d'un patient en déterminant la position des repères permanents de ladite lentille.

En mode tensiscope, il permet de détecter et de localiser automatiquement les tensions existantes dans les lentilles ophtalmiques montées pour vérifier que chaque lentille ophtalmique est correctement montée sur la monture.

Les tensions dans une lentille ophtalmique montée sont dues à un mauvais usinage de la lentille qui est trop grande par rapport au cercle de la monture qui la reçoit. La lentille est alors contrainte dans la monture ce qui génère des tensions pouvant la détériorer.

Le principe utilisé dans le tensiscope consiste à mettre en évidence la biréfringence de la lentille (l'indice de la lentille n'est plus isotrope, mais dépend de la direction de polarisation de la lumière), cette biréfringence étant liée aux contraintes subies par ladite lentille.

5 Pour mettre en évidence cette biréfringence, le tensiscope comporte, d'une part, une source de lumière homogène, polarisée linéairement à l'aide d'un polariseur disposé juste après la source de lumière, qui éclaire la lentille ophtalmique montée, et, d'autre part, un second polariseur disposé après la lentille au travers duquel l'opticien regarde la lentille ophtalmique éclairée.

10 En cas d'absence de tensions, la lentille ophtalmique éclairée apparaît homogène à l'opticien.

En cas de tensions, l'opticien voit apparaître des franges colorées ou nuancées dans ladite lentille ophtalmique éclairée, les franges étant d'autant plus serrées à un endroit que la lentille est contrainte à cet endroit.

15 Au vue des franges colorées ou nuancées observées, l'opticien doit alors évaluer la valeur de la reprise à effectuer sur ladite lentille pour que son montage sur la monture soit correct, c'est-à-dire sans contrainte.

En mode frontofocomètre, il permet de mesurer ou de vérifier la puissance en un point de référence d'une lentille ophtalmique à addition progressive de
20 puissance ou de repérer et de mesurer les puissances d'une lentille ophtalmique unifocale.

La plupart des frontofocomètres fonctionnent à partir du même principe optique, tel que décrit dans le document « Paraxial Optics » de W.F. Long, dans Visual Optics and Instrumentation, Ed. N. Charman, Macmillan Press, London
25 1991, pages 418-419.

Les frontofocomètres déjà connus peuvent être équipés d'un système de marquage et de maintien de la lentille non montée (avec doigts d'appui ou pince à lentille) du type de ceux qui sont commercialisés sous la marque Essilor ACL 60 par la société Visionix ou sous la marque Essilor CLE 60 par la société
30 japonaise Shin Nippon.

Le dispositif 100 comporte un bâti 1, formant boîtier contenant différents éléments optiques, sur lequel est monté un support 110 adapté à recevoir une monture de lunettes pourvue de lentilles ophtalmique 10.

Comme le montrent les figures 3 et 5, le dispositif 100 comporte de part et d'autre du support 110, d'une part, des premiers moyens d'éclairage 120 de la lentille ophtalmique 10 installée sur le support 110 et, d'autre part, des premiers moyens d'acquisition et d'analyse 130 de la lumière transmise par ladite lentille 10.

Préférentiellement, lesdits premiers moyens d'éclairage 120 sont activables et désactivables.

Ils comprennent une source de lumière blanche 121 et un diffuseur 122 pour éclairer la lentille ophtalmique 10 avec une lumière diffuse.

Les premiers moyens d'acquisition et d'analyse 130 comprennent ici une caméra numérique 134. Ils comprennent en outre, entre un filtre polarisant aval 150 et la caméra numérique 134, un système optique de renvoi de faisceaux lumineux comprenant une lentille convergente 131 et un miroir 132 incliné à 45°. Lesdits premiers moyens d'acquisition et d'analyse 130 comprennent également des moyens de traitement d'image (non représentés) adaptés à traiter le signal obtenu en sortie de la caméra 134 et des moyens d'affichage (non représentés) du signal traité.

Comme le montrent les figures 5 et 6, pour exercer la fonction « Pal Id » sur des lentilles ophtalmiques en matière synthétique, le dispositif 100 comporte, entre lesdits premiers moyens d'éclairage 120 et ledit support 110, un filtre à motifs 140 répétés et réguliers activable et désactivable.

Ce filtre à motifs 140 est avantageusement formé par un écran à cristaux liquides (LCD).

Les figures 4A et 4B montrent deux filtres à motifs 140 différents activés, l'un comportant une trame de points noirs sur fond transparent, l'autre une trame de rayures noires sur fond transparent.

Le dispositif 100 comprend également deux filtres polarisants, à savoir un filtre polarisant amont disposé entre lesdits premiers moyens d'éclairage 120 et ledit support 110, et un filtre polarisant aval 150 disposé entre ledit support 110 et lesdits premiers moyens d'acquisition et d'analyse 130.

Ces deux filtres polarisants associés aux premiers moyens d'éclairage 120 et aux premiers moyens d'acquisition et d'analyse 130 permettent au dispositif 100 d'exercer la fonction tensiscope (voir figure 3). La polarisation des deux filtres est ménagée suivant une direction commune (et non pas selon deux directions

perpendiculaires comme dans un tensiscopie classique à filtres polariseurs croisés), de façon à permettre la mise en œuvre des autres fonctions et en particulier de la fonction « Pal Id » sans blocage de la lumière par les deux filtres. On comprend en effet qu'une combinaison de filtres croisés bloquerait la lumière

5 dans les zones de la lentilles dépourvues de tensions, ce qui s'opposerait à tout autre repérage ou mesure sur celle-ci. De plus, cette direction commune de polarisation des deux filtres doit être sensiblement identique à la direction de polarisation de la lentille à analyser. A défaut, les zones non tendues de la lentille « bloqueraient » la lumière en combinaison avec les deux filtres, ce qui

10 s'opposerait à nouveau à toute identification ou mesure sur cette lentille. En pratique la polarisation sera donc, généralement, horizontale par référence à la configuration d'utilisation de la lentille.

Lorsqu'il est activé, le filtre à motifs 140 sert à faire apparaître les repères permanents de la lentille ophtalmique 10 en matière synthétique placée sur ledit

15 support 110, interposée entre lesdits premiers moyens d'éclairement 120 et lesdits premiers moyens d'acquisition et d'analyse (fonction « Pal Id »). Lorsqu'il est désactivé, l'écran à cristaux liquides formant le filtre à motifs 140 permet d'effectuer une autre mesure sur ladite lentille ophtalmique 10 puisqu'il forme également le filtre polarisant amont disposé entre lesdits premiers moyens

20 d'éclairement et la lentille (fonction tensiscopie).

Comme le montre la figure 6, le dispositif 100 comprend par ailleurs des deuxièmes moyens d'éclairement 120' activables et désactivables, adaptés à éclairer en lumière rasante une lentille ophtalmique 10' en matière minérale installée sur ledit support 110, lesdits premiers moyens d'acquisition et d'analyse

25 130 étant aptes à analyser le faisceau lumineux transmis par ladite lentille 10' éclairée en lumière rasante. Ces deuxièmes moyens d'éclairement 120' permettent de faire apparaître les repères permanents sur des lentilles ophtalmiques en matière minérale (fonction « Pal Id »). Bien entendu pour ce fonctionnement, les premiers moyens d'éclairement 120 doivent être désactivés

30 au profit des deuxièmes moyens d'éclairement 120'.

Comme le montrent plus particulièrement les figures 3 et 5, pour exercer la fonction frontofocomètre, le dispositif 100 comprend des moyens de mesure de puissance adaptés à mesurer en un point de référence la puissance de la lentille ophtalmique 10. Dans l'exemple proposé, ces moyens de mesure de puissance

comprennent des troisièmes moyens d'éclairiment 220 disposés latéralement par rapport auxdits premiers moyens d'éclairiment 120, et adaptés à élaborer un faisceau lumineux dirigé sur une lentille ophtalmique installée sur ledit support 110 positionné en regard desdits troisièmes moyens d'éclairiment 220. Il comprend également en aval d'un embout frontofocomètre 221 incluant un masque d'Hartmann, des deuxièmes moyens d'acquisition et d'analyse 230 du faisceau lumineux transmis par ladite lentille installée sur ledit support 110 en regard dudit embout frontofocomètre 221. Ces deuxièmes moyens d'acquisition et d'analyse 230 comprennent une caméra 231.

10 Comme le montrent les figures 1 et 2, le support 110 est plus particulièrement adapté à supporter une monture de lunettes M d'un patient.

Il comporte à cet effet un nez 111 et une mâchoire de serrage 112 aptes à serrer la monture de lunettes M (voir figure 9).

15 Le nez 111 est un demi-cylindre qui s'élève à partir d'un pied 111A cylindrique. La mâchoire de serrage 112 est rattachée au pied 111A cylindrique, elle comporte une partie en forme de L inversé dont une extrémité libre comprend une encoche 112A faisant face au nez 111.

Ainsi, le nez de la monture M repose sur le pied 111A cylindrique et est serré entre ladite encoche 112A de la mâchoire de serrage 112 et ledit nez 111.

20 Avantageusement, la mâchoire de serrage 112 est déplaçable en translation par rapport audit nez 111 tout en étant en permanence rappelée dans une position initiale par rapport à ce dernier par un moyen élastique de rappel (un ressort non représenté) de manière à garantir un serrage correct du nez de la monture M et donc le maintien en position fixe de ladite monture M sur ledit support 110.

25 Plus particulièrement, la mâchoire de serrage 112 comporte une tirette qui coulisse dans une rainure (non représentée) du pied 111A cylindrique qui contient le ressort de rappel en position de ladite mâchoire.

Avantageusement, le support 110 est déplaçable en translation dans un plan, suivant deux axes X, Y perpendiculairement entre eux pour prendre différentes positions de mesure des caractéristiques de la lentille ophtalmique 10 correspondant aux différents modes de fonctionnement du dispositif 100 comme cela sera expliqué plus en détail ultérieurement (voir figures 7 et 8).

Pour ce faire, le nez 111 du support 110 est rattaché à une partie de coulissement 114 apte à coulisser dans une rainure 115A d'une réglette 115

s'étendant suivant l'axe X et la réglette 115 porte des tiges 116 qui s'étendent suivant l'axe Y et qui sont destinées à coulisser dans des conduits correspondants (non représentés) du bâti 1.

Avantageusement, ledit nez 111 rattaché à ladite partie de coulissement 114 par l'intermédiaire du pied 111A cylindrique est apte à être déplacé en translation suivant l'axe Y par rapport à ladite réglette 115 tout en étant en permanence rappelé dans une position initiale par rapport à ladite réglette 115 par un moyen élastique de rappel (ici un ressort non représenté). Cela permet de mettre en contact le bord inférieur de la monture M et le bord correspondant 115B de la réglette 115.

Préférentiellement, ledit support 110 est déplaçable suivant un troisième axe Z perpendiculaire aux deux premiers axes X, Y de déplacement. Cela permet, en mode frontofocomètre, de soulever le support 110 et donc la monture M, pour placer l'une des lentilles ophtalmiques 10 puis l'autre dans la position de mesure adéquate sans venir heurter l'embout frontofocomètre 221. En outre, le nez 111 du support 110 est monté à pivotement sur ladite partie de coulissement 114. Comme le montre plus particulièrement la figure 9, le pied 111A cylindrique porte en saillie deux tétons 111B alignés formant l'axe de pivotement X. Ces tétons 111B sont montés dans des rainures formées dans deux oreilles 114A prévues en bout de ladite partie de coulissement 114. Ce pivotement du nez 111 du support 110 permet, en mode frontofocomètre, de placer correctement la lentille ophtalmique 10 correspondant par rapport à l'embout frontofocomètre 221.

Afin que le dispositif 100 puisse repérer la position du support 110 dans un référentiel fixe (représenté par le bâti 1), celui-ci peut comporter, selon un premier mode de réalisation, des moyens de mesure (non représentés) de son déplacement par rapport à une position initiale. Ces moyens de mesure comprennent des encodeurs incrémentaux tels que par exemple les encodeurs incrémentaux fabriqués (sous la référence RE20F-100-200) par la société COPAL ELECTRONICS.

Selon un mode de réalisation préférentiel, ledit support 110 comporte au moins un pointeur passif 113 ; 113' qui, lorsqu'il est éclairé par lesdits premiers moyens d'éclairage 120, forme, en ombre, une image de repérage sur lesdits premiers moyens d'acquisition et d'analyse 130 permettant de déterminer la position dudit support 110 dans le référentiel fixe.

Comme le montrent les figures 7 et 8, ledit support 110 étant mobile entre plusieurs positions de mesure des caractéristiques de ladite lentille, il comporte plusieurs pointeurs passifs 113,113' agencés de telle façon que l'un au moins de ces pointeurs passifs 113,113' est éclairé par lesdits premiers moyens d'éclairement 120 et forme, en ombre, une image de repérage sur lesdits premiers moyens d'acquisition et d'analyse 130, qu'elle que soit la position de mesure prise par ledit support 110.

Chaque pointeur passif 113,113' présente une ligne de contour externe ou interne 113A, 113A', 113B' polygonale, circulaire ou cruciforme.

Ici, le support 110 comporte, en avant de ladite mâchoire de serrage 112, un de ces pointeurs passifs formé par une languette 113 comportant une lumière 113A à contour polygonale, circulaire ou cruciforme.

Il comporte également en arrière de ladite réglette 115, à l'extrémité de ladite partie de coulissement 114, un autre de ces pointeurs passifs constitué par une languette 113' pourvue de deux lumières 113'A,113'B à contour polygonale, circulaire ou cruciforme.

Ainsi, lorsque le dispositif 100 fonctionne en mode frontofocomètre sur une lentille ophtalmique 10 à addition de puissance progressive ou sur une lentille multifocale à discontinuité de puissance, il met en œuvre un procédé pour la vérification de la puissance en un point de référence de ladite lentille, comprenant les étapes suivantes :

- a) on positionne ladite lentille ophtalmique 10 sur ledit support 110,
- b) on déplace ledit support 110 pour placer la lentille ophtalmique 10 en regard des premiers moyens d'éclairement 120 (voir figure 2),
- c) on éclaire la lentille ophtalmique 10 à l'aide desdits premiers moyens d'éclairement 120 alors que le filtre à motifs est activé,
- d) on recueille par la caméra numérique 134 desdits premiers moyens d'acquisition et d'analyse 130 la lumière transmise par la lentille ophtalmique 10,
- e) on traite le signal sortant de ladite caméra numérique 134 pour déterminer la position des repères permanents 16 de la lentille ophtalmique 10 (voir figure 10) dans un référentiel fixe,
- f) on mémorise cette position en tant que position initiale de ladite lentille ophtalmique 10,

g) on calcule (avec les encodeurs incrémentaux) le déplacement de ladite lentille ophtalmique 10 par rapport à ladite position initiale pour placer ledit point de référence en regard desdits moyens de mesure de puissance 220,230 (voir figure 1),

- 5 h) on déplace ledit support 110 conformément au déplacement calculé, et
i) on effectue la mesure de puissance audit point de référence.

Lorsque le dispositif 100 fonctionne en mode « Pal Id », son filtre à motifs 140 est activé. Il peut alors mettre en œuvre un procédé pour la vérification d'au moins une caractéristique de centrage d'une lentille ophtalmique 10 à addition de
10 puissance progressive, comprenant les étapes suivantes :

- a) on acquiert une position initiale du support 110 dans un référentiel fixe,
b) on positionne la lentille ophtalmique 10 sur le support 110,
c) on déplace le support 110 pour placer la lentille ophtalmique 10 en regard desdits premiers moyens d'éclairement 120 (voir figure 2),
15 d) on mesure (avec les encodeurs incrémentaux) le déplacement du support 110 par rapport à sa position initiale,
e) on éclaire la lentille ophtalmique 10 à l'aide desdits premiers moyens d'éclairement 120,
f) on recueille par ladite caméra numérique 134 desdits premiers moyens
20 d'acquisition et d'analyse 130 la lumière transmise par la lentille ophtalmique 10,
g) on traite le signal sortant de ladite caméra numérique 134 pour déterminer la position des repères permanents 16 de la lentille ophtalmique 10 dans ledit référentiel fixe, et
25 h) on déduit de la position initiale dudit support, du déplacement mesuré de celui-ci et de la position des repères permanents de ladite lentille ophtalmique 10, la valeur de ladite caractéristique de centrage.

Les caractéristiques de centrage sont classiquement le demi-écart interpupillaire et la hauteur de montage de la lentille ophtalmique 10 montée sur
30 sa monture M.

Selon le procédé précité, la position du support 110 est déduite d'une position initiale déterminée lors de l'étape a) préliminaire d'initialisation et d'un déplacement mesuré du support 110 pour placer la lentille ophtalmique en regard des moyens d'éclairement 120 (étapes b) à d)).

Le dispositif 100 peut toutefois mettre en œuvre un autre procédé de vérification d'au moins une caractéristique de centrage dans lequel on acquière par la caméra numérique 134 la position du support 110 à l'aide d'un de ces pointeurs passifs 113,113'.

5 Ce procédé comprend les étapes suivantes :

- a) on positionne la lentille ophtalmique 10 sur le support 110 placé en regard du filtre à motifs 140 activé,
- b) on éclaire au travers dudit filtre à motifs 140 la lentille ophtalmique 10 à l'aide d'une source de lumière diffuse 121,122,
- 10 c) on recueille par la caméra numérique 134 des premiers moyens d'acquisition et d'analyse 130 la lumière transmise par la lentille ophtalmique 10,
- d) on désactive le filtre à motifs,
- e) on traite le signal sortant de la caméra numérique 134 pour déterminer la position des repères permanents de la lentille ophtalmique 10 dans un référentiel fixe,
- 15 f) on détermine la position du support 110 dans le référentiel fixe,
- g) on déduit de la position connue du support 110 et de la position des repères permanents de la lentille ophtalmique 10, la valeur de ladite caractéristique de centrage.
- 20

Avantageusement selon ce procédé, lors de l'étape e) on réalise simultanément l'étape f) où l'on recueille par la caméra au moins une image de repérage formée, en ombre, par un pointeur passif 113 prévu sur le support 110 (voir figure 7).

25 Plus précisément, à l'étape b) on éclaire ledit support 110 à l'aide de ladite source de lumière diffusé 121,122 desdits premiers moyens d'éclairement 120, à l'étape c) on recueille par ladite caméra numérique 134 la lumière transmise au travers dudit support 110 et à l'étape f) on traite le signal sortant de la caméra numérique 134 pour déterminer la position du pointeur passif 113A dans le référentiel fixe.

30

Bien entendu en variante, on peut prévoir qu'à l'étape e) on recueille un signal émis directement par le support 110 au niveau de la marque fixe 113A.

Ainsi selon ce procédé, comme le montre la figure 7, à l'étape f) on détermine le demi-écart interpupillaire en calculant la distance existant entre la

position du milieu du nez de ladite monture M donnée par un des pointeurs passifs 113 dudit support 110 et la position du point central 12 de ladite lentille ophtalmique 10 situé au milieu du segment de droite reliant les deux repères permanents 16 correspondants de ladite lentille ophtalmique 10.

- 5 Selon ce procédé également, à l'étape f) on détermine la hauteur en calculant la distance existant entre la position du bord supérieur ou inférieur de ladite monture M (matérialisé par le bord 115A de la règle 115 visualisé par la caméra numérique 134) et la position du point central 12 de ladite lentille ophtalmique 10 situé au milieu du segment de droite reliant les deux repères
- 10 permanents 16 correspondants de ladite lentille ophtalmique 10 (voir figures 7 et 10).

Plus généralement le dispositif 100 peut mettre en œuvre un procédé de détection automatique de diverses caractéristiques d'une lentille ophtalmique 10 pourvue de repères, qui comporte les étapes suivantes :

- 15 - la lentille ophtalmique 10 étant placée sur ledit support 110, on déplace le support 110 pour positionner ladite lentille dans une position de mesure,
- on éclaire à l'aide desdits premiers moyens d'éclairement ladite lentille et au moins au moins un pointeur passif dudit support 110,
- on recueille par lesdits moyens d'acquisition et d'analyse 130 un fichier
- 20 numérique représentatif de l'image de la lentille 10,
- on désactive le filtre à motifs,
- on recueille par lesdits moyens d'acquisition et d'analyse 130 un fichier numérique représentatif de l'image de repérage formée, en ombre, par ledit pointeur passif,
- 25 - on traite les fichiers numériques recueillis, et
- on en déduit la position ~~du~~ support 110 et celle des repères de la lentille dans un référentiel fixe.

L'algorithme qui permet d'obtenir la position du support à partir de l'image capturée fonctionne de la manière suivante :

- 30 - on effectue une binarisation de l'image de repérage et on conserve uniquement les points d'intensité lumineuse supérieure à un seuil prédéfini,
- on effectue une opération de segmentation : on isole et numérote les différents objets obtenus par la binarisation (un objet est un amas de pixels contigus),

- on détermine les caractéristiques (taille, position du barycentre) des différents objets,

- on trie les objets en fonction de leur taille: on supprime les objets de taille largement plus grande et largement plus petite que la taille du ou des pointeurs passifs,

5 - on compare les objets restants à la forme théorique du ou des pointeurs passifs en effectuant une corrélation entre les objets conservés et un masque représentatif du ou des pointeurs passifs ; la corrélation est une opération bien connue en traitement d'image qui consiste à multiplier le masque représentatif
10 avec l'objet ; la corrélation est maximale quand le masque et l'objet sont parfaitement identiques,

- on conserve les objets pour lesquels la corrélation est supérieure à un seuil prédéfini. Il ne reste normalement, à ce stade, plus que les objets correspondant aux pointeurs passifs,

15 - on détermine la position des pointeurs passif dans l'image à l'aide des barycentres des objets correspondant et précédemment calculée,

- on en déduit la position des pointeurs dans le référentiel fixe, car on connaît la transformation permettant de passer d'une position en pixel dans l'image à une position en millimètres dans le référentiel fixe, et

20 - on déduit de la position du ou des pointeurs passif la position du support.

La transformation permettant de passer d'une position en pixel dans l'image à une position en millimètres dans le référentiel fixe est définie lors de l'étalonnage du dispositif. On peut par exemple, pour déterminer cette transformation, utiliser une mire transparente positionnée sur le dispositif de détection sur laquelle une
25 grille de pas connu est sérigraphiée. Cette mire est indexée par rapport à l'embout frontofocomètre, qui est l'origine du référentiel fixe. Chaque intersection de la grille correspond à un pixel bien déterminé et à une coordonnée bien déterminée dans le référentiel fixe. On a ainsi la transformation pixel/coordonnée dans référentiel fixe et on stocke cette transformation en mémoire.

30 Une fois que le dispositif 100 a localisé le pointeur passif 113 correspondant du support 110 et les repères permanents 16 de la lentille ophtalmique 10, il peut en déduire les valeurs des demi-écarts interpupillaire et de la hauteur de montage de la lentille ophtalmique montée sur la monture M.

Comme le montre la figure 5, l'opticien peut également utiliser le dispositif 100 pour simplement faire apparaître les repères permanents d'une lentille ophtalmique brute afin de marquer à l'aide d'un marqueur ces repères sur ladite lentille.

5 Lorsque le dispositif 100 fonctionne en mode tensiscopie, le filtre à motifs 140 est désactivé et l'écran LCD forme alors un filtre polarisant.

L'opticien place à l'aide du support 110 la lentille ophtalmique montée sur sa monture M en regard desdits premiers moyens d'éclairage 120, et plus particulièrement entre les deux filtres polarisants amont 140 et aval 150. Il éclaire
10 ladite lentille 10 et la caméra numérique 134 capture l'image de la lentille 10.

Ledit dispositif 100 peut donner alors une des trois informations suivantes :

- une information binaire indiquant que la lentille ophtalmique 10 est correctement montée sur sa monture M (c'est-à-dire sans contrainte);
- une information binaire indiquant que la lentille ophtalmique 10 est
15 correctement montée sur sa monture M et dans le cas où la lentille est trop tendue, il indique à l'opticien la valeur de la reprise d'usinage à effectuer sur ladite lentille, et éventuellement la position angulaire de la reprise à effectuer lorsque celle-ci ne doit affecter qu'une portion de la périphérie de la lentille, pour que le montage de ladite lentille sur la monture M soit
20 correct,
- il affiche l'image capturée de la lentille 10 sur un écran et l'opticien peut alors, à la vue de cette image, considéré si le montage est correct ou non, et le cas échéant décidé de la valeur de la reprise d'usinage à effectuer sur ladite lentille.

25 Enfin, avantageusement l'opticien peut utiliser le dispositif 100 décrit précédemment pour positionner et mesurer sur une lentille ophtalmique l'emplacement et éventuellement la forme des trous à effectuer pour monter les branches d'une monture sans cercle.

Il place sur le support 110 un gabarit de perçage et positionne ledit support
30 110 face auxdits premiers moyens d'éclairage 120. Il éclaire ce gabarit de perçage et obtient avec la caméra numérique 134 une image de celui-ci. Le dispositif 100 affiche alors sur un écran l'image obtenue de façon que l'opticien ait une simulation du montage à effectuer. Bien entendu les informations obtenues peuvent être envoyées à une perceuse non représentée qui effectue

automatiquement les trous dans ladite lentille ophtalmique aux emplacements mesurés.

La présente invention n'est nullement limitée aux modes de réalisation décrits et représentés, mais l'homme du métier saura y apporter toute variante
5 conforme à son esprit.

REVENDEICATIONS

1. Procédé de vérification d'au moins une caractéristique de centrage d'une lentille ophtalmique (10) pourvue de repères et montée sur une monture, comprenant les étapes suivantes :

- 5 a) on positionne la lentille ophtalmique sur un support (110) placé en regard d'un filtre à motifs (140),
b) on éclaire au travers dudit filtre à motifs (140) la lentille ophtalmique (10) à l'aide d'une source de lumière diffuse,
c) on recueille par une caméra numérique (134) la lumière transmise par la lentille
10 ophtalmique,
d) on traite le signal sortant de la caméra numérique (134) pour déterminer la position des repères de la lentille ophtalmique (10) dans un référentiel fixe,
e) on détermine la position du support (110) dans le référentiel fixe, et
f) on déduit de la position connue du support (110) et de la position des repères
15 permanents de la lentille ophtalmique (10), la valeur de ladite caractéristique de centrage.

2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que lors de l'étape d) on réalise simultanément l'étape e).

3. Procédé selon l'une des revendications 1 ou 2, caractérisé en ce qu'à
20 l'étape e) on recueille par la caméra au moins une image de repérage formée, en ombre, par un pointeur passif prévu sur le support (110).

4. Procédé selon la revendication 3, caractérisé en ce qu'à l'étape b) on éclaire ledit support (110) à l'aide de ladite source de lumière diffuse, à l'étape c) on recueille par ladite caméra numérique (134) la lumière transmise au travers
25 dudit support (110) et à l'étape e) on traite le signal sortant de la caméra numérique (134) pour déterminer la position du pointeur passif dans le référentiel fixe.

5. Procédé selon la revendication 3, caractérisé en ce qu'à l'étape e) on recueille un signal émis directement par le support au niveau dudit pointeur passif.

- 30 6. Procédé selon l'une des revendications 3 à 5, caractérisé en ce qu'à l'étape f) on détermine le demi-écart interpupillaire en calculant la distance existant entre la position du milieu du nez de ladite monture (M) donnée par un des pointeurs passifs (113) dudit support et la position du point central (112) de

ladite lentille ophtalmique (10) situé au milieu du segment de droite reliant les deux repères permanents (16) correspondants de ladite lentille ophtalmique.

5 7. Procédé selon l'une des revendications 3 à 6, caractérisé en ce qu'à l'étape f) on détermine la hauteur en calculant la distance existant entre la position du bord supérieur ou inférieur de ladite monture (M) et la position du point central (12) de ladite lentille ophtalmique (10) situé au milieu du segment de droite reliant les deux repères permanents (16) correspondants de ladite lentille ophtalmique.

10 8. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce qu'à l'étape e) la position du support est déduite d'une position initiale déterminée lors d'une étape préliminaire d'initialisation et d'un déplacement mesuré du support pour placer la lentille ophtalmique en regard des moyens d'éclairage.

1/5

Fig.1

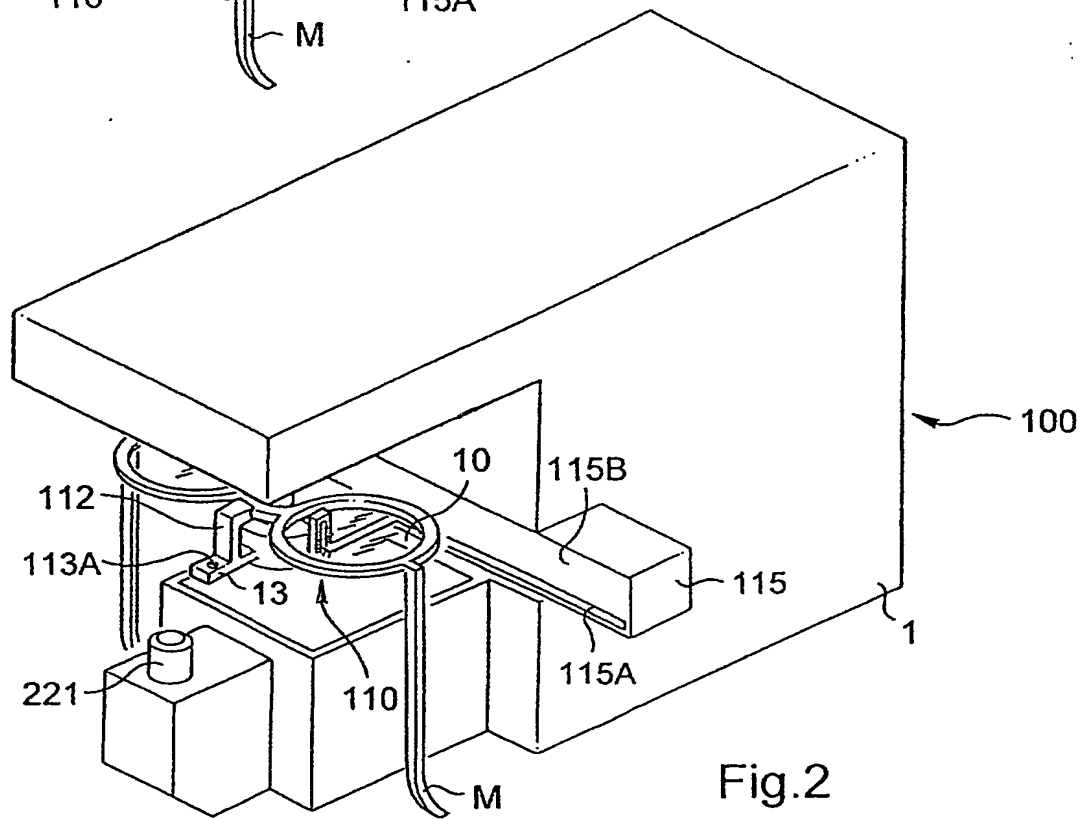
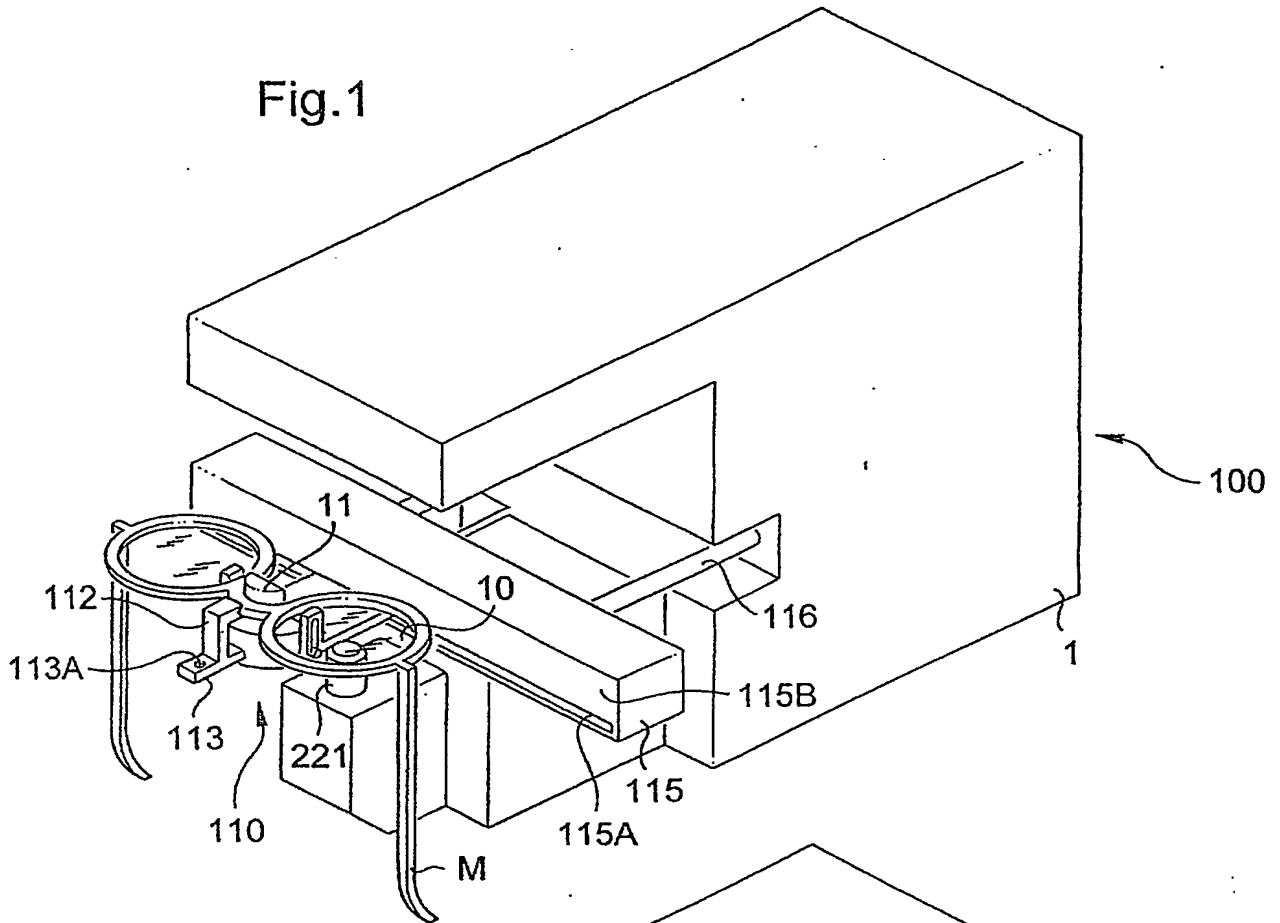


Fig.2

Fig.3

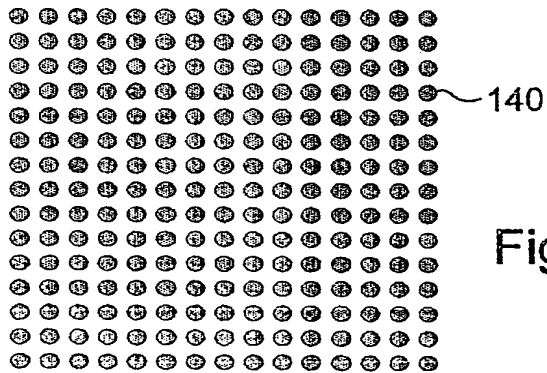
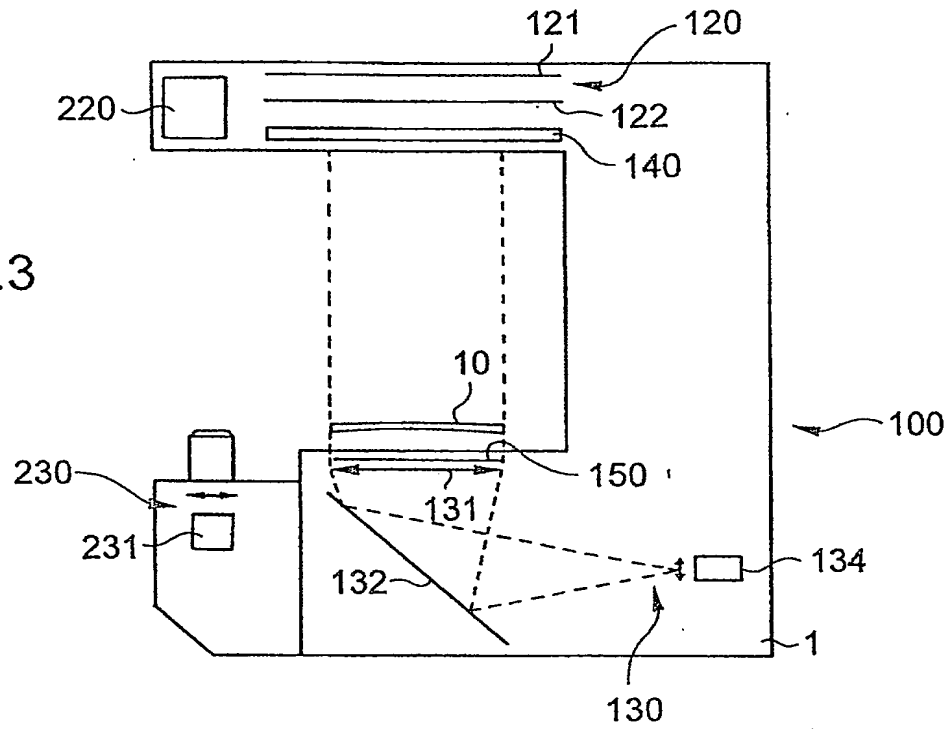


Fig .4A

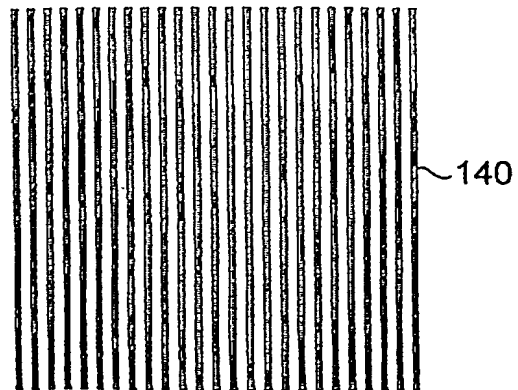


Fig.4B

Fig.5


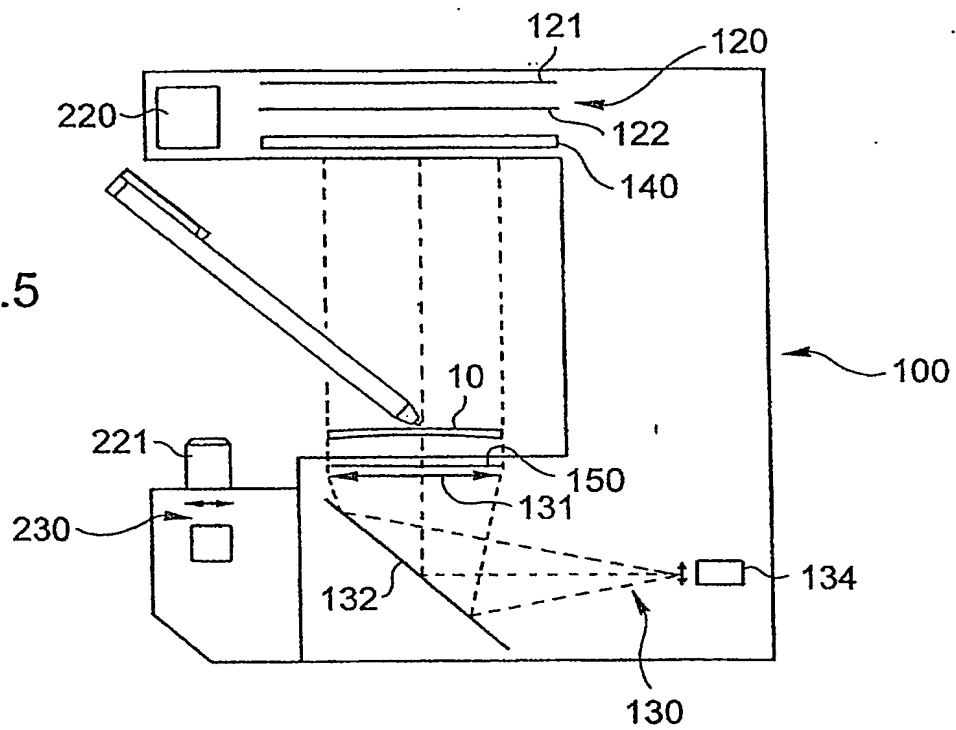


Fig.6

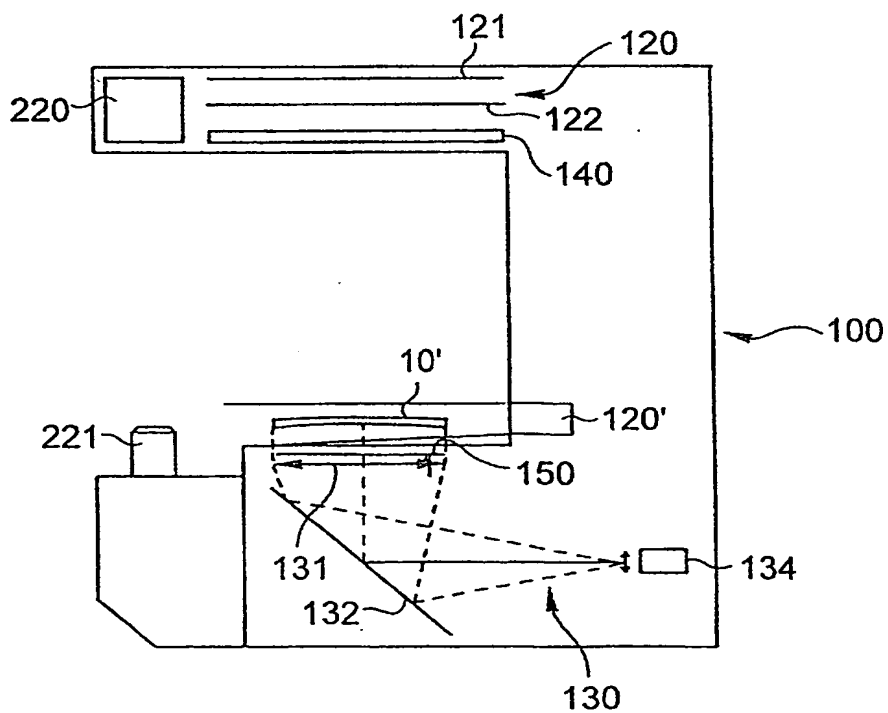

4/5

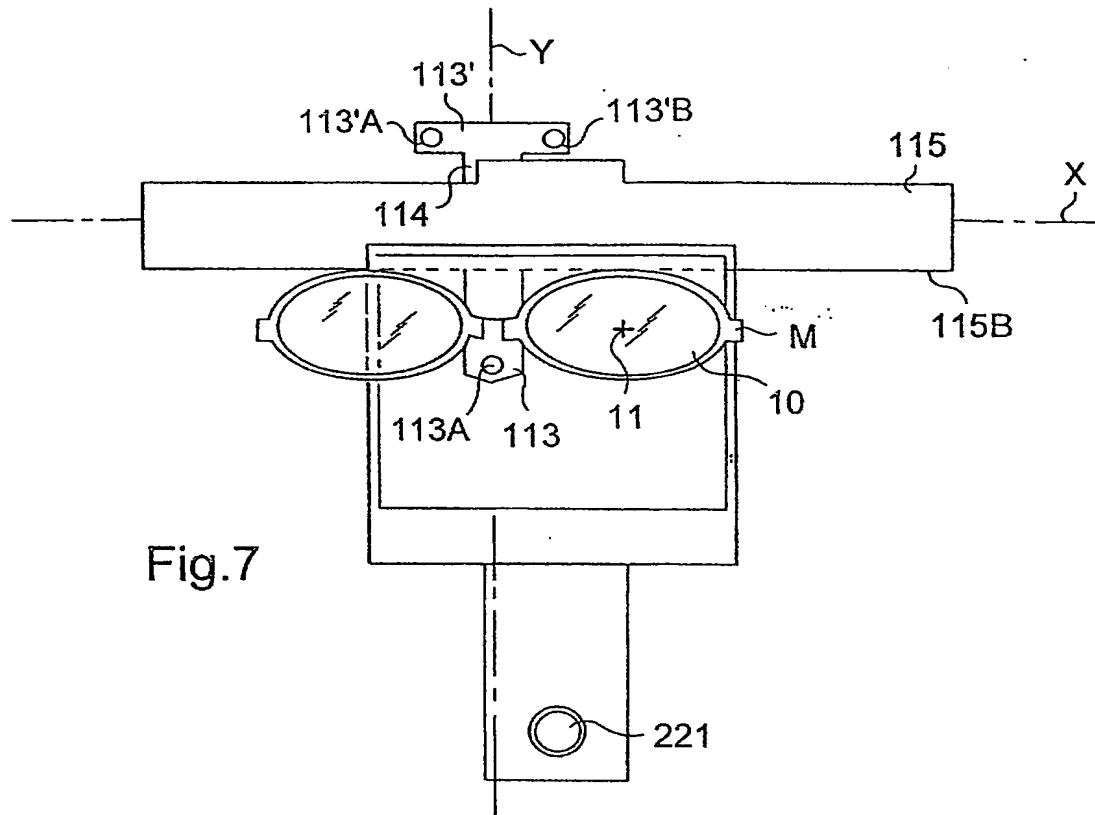


Fig. 7

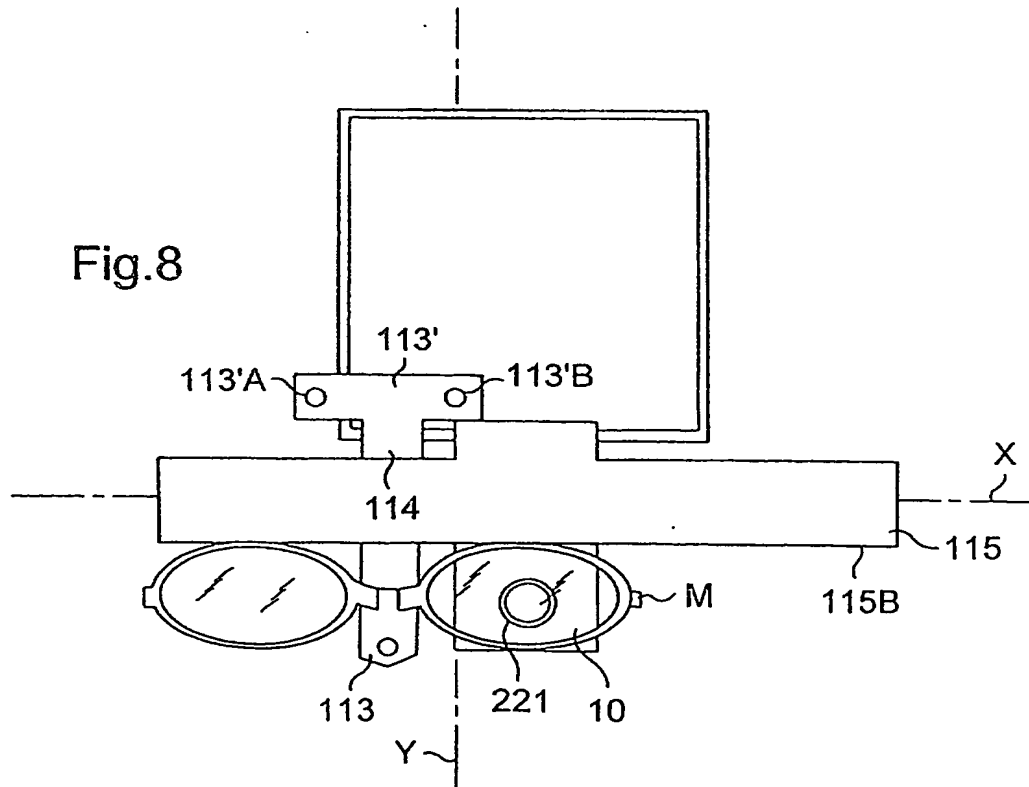


Fig. 8

Fig.9


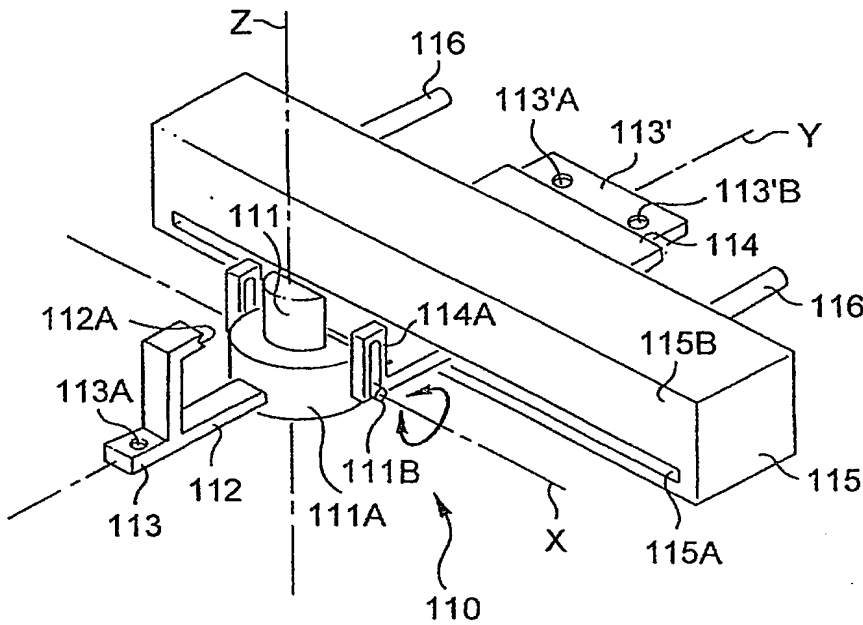


Fig.10



reçue le 23/01/04

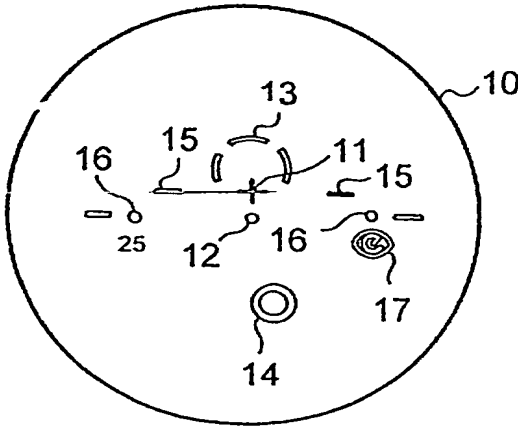

16 bis, rue de Saint Pétersbourg - 75800 Paris Cedex 08

Pour vous informer : INPI DIRECT

0 825 83 85 87
0,15 € TTC/mn

Télécopie : 33 (0)1 53 04 52 65

BREVET D'INVENTION

CERTIFICAT D'UTILITÉ

Code de la propriété intellectuelle - Livre VI



N° 11235*03

DÉSIGNATION D'INVENTEUR(S) Page N° .1. / .1.



(À fournir dans le cas où les demandeurs et les inventeurs ne sont pas les mêmes personnes)

Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire

DB 113 @ W / 210103

Vos références pour ce dossier (facultatif)	3A-0008
N° D'ENREGISTREMENT NATIONAL	

TITRE DE L'INVENTION (200 caractères ou espaces maximum)

Procédé automatique de vérification d'au moins une caractéristique de centrage d'une lentille ophtalmique pourvue de repères

LE(S) DEMANDEUR(S) :

Essilor International (Compagnie Générale d'Optique)

DESIGNE(NT) EN TANT QU'INVENTEUR(S) :

1 Nom	LEMAIRE	
Prénoms	Cédric	
Adresse	Rue	Essilor International 147 rue de Paris
	Code postal et ville	94227 Charenton
Société d'appartenance (facultatif)		
2 Nom	DIVO	
Prénoms	Fabien	
Adresse	Rue	Essilor International 147 rue de Paris
	Code postal et ville	94227 Charenton
Société d'appartenance (facultatif)		
3 Nom		
Prénoms		
Adresse	Rue	
	Code postal et ville	
Société d'appartenance (facultatif)		

S'il y a plus de trois inventeurs, utilisez plusieurs formulaires. Indiquez en haut à droite le N° de la page suivi du nombre de pages.

**DATE ET SIGNATURE(S)
DU (DES) DEMANDEUR(S)
OU DU MANDATAIRE**
(Nom et qualité du signataire)

Vincent CHAUVIN
CPI n° 00 0401

8/11/2003



reçue le 23/01/04

BREVET D'INVENTION**CERTIFICAT D'UTILITÉ**

Code de la propriété intellectuelle - Livre VI



N° 11235*03

26 bis, rue de Saint Pétersbourg - 75800 Paris Cedex 08

Pour vous informer : INPI DIRECT

0 825 83 85 87
0,15 € TTC/mn

Télécopie : 33 (0)1 53 04 52 65

DÉSIGNATION D'INVENTEUR(S) Page N° .1. / .1.

(À fournir dans le cas où les demandeurs et les inventeurs ne sont pas les mêmes personnes)



Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire

DB 113 G W / 210103

Vos références pour ce dossier (facultatif)		3A-0008
N° D'ENREGISTREMENT NATIONAL		
TITRE DE L'INVENTION (200 caractères ou espaces maximum) Procédé automatique de vérification d'au moins une caractéristique de centrage d'une lentille ophtalmique pourvue de repères		
LE(S) DEMANDEUR(S) : Essilor International (Compagnie Générale d'Optique)		
DESIGNE(NT) EN TANT QU'INVENTEUR(S) :		
1	Nom	LEMAIRE
	Prénoms	Cédric
Adresse	Rue	Essilor International 147 rue de Paris
	Code postal et ville	94227 Charenton
Société d'appartenance (facultatif)		
2	Nom	DIVO
	Prénoms	Fabien
Adresse	Rue	Essilor International 147 rue de Paris
	Code postal et ville	94227 Charenton
Société d'appartenance (facultatif)		
3	Nom	
	Prénoms	
Adresse	Rue	
	Code postal et ville	
Société d'appartenance (facultatif)		
S'il y a plus de trois inventeurs, utilisez plusieurs formulaires. Indiquez en haut à droite le N° de la page suivi du nombre de pages.		
DATE ET SIGNATURE(S) DU (DES) DEMANDEUR(S) OU DU MANDATAIRE (Nom et qualité du signataire) Vincent CHAUVIN CPI n° 00 0401		

8/11/2003

FR 04/02829



This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record.

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

☒ **BLACK BORDERS**

☐ **IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES**

☐ **FADED TEXT OR DRAWING**

☐ **BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING**

☐ **SKEWED/SLANTED IMAGES**

☐ **COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS**

☐ **GRAY SCALE DOCUMENTS**

☒ **LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT**

☒ **REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY**

☐ **OTHER:** _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.